

TML5 Fixe Stratifié

Table à manger au lit / C, 1 plateau, fixe stratifié

Réf. GHTML5PF-S



Les tables à manger au lit **TML5** ont été spécialement conçues pour l'ambulateur, elles possèdent un piètement plus petit pour minimiser l'encombrement. La version **GHTML5PF-S** est composée d'un piètement en C (ambulateur) et d'un plateau fixe stratifié résistant mécaniquement avec un large choix de coloris. Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

Spécifications techniques

PLATEAU

- **Fixe**
Sa taille très compacte est particulièrement adaptée pour l'ambulateur
- **Stratifié**
 - > Plateaux esthétiques avec un large choix de coloris
 - > Résistant mécaniquement
 - > Résistant à la chaleur
 - > Lisse sans aspérité
 - > Angles arrondis
 - > Chant blanc ABS

PIÈTEMENT

- Piètement **en C** pour minimiser l'encombrement préconisé pour l'ambulateur
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

GALERIE

Située sur le côté droit, elle permet de prévenir la chute d'objets (le plateau peut également être réalisé sans galerie, à préciser à la commande)

STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc
- Grande robustesse et stabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
 - Avec sécurité anti-coincement à la montée pour une sécurité optimale
 - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Hauteur variable | 75 cm – 106.5 cm |
| Dimension du plateau | 71 x 41 cm |
| Épaisseur du plateau | 19 mm |
| Hauteur du piètement | 9.5 cm |
| Longueur du piètement | 62 cm |
| Largeur du piètement | 50 cm |
| Longueur totale | 71 cm |
| Largeur totale | 50 cm |

| | |
|------------------------------|--|
| Poids à vide | 17.5 kg |
| Charge maximale | 15 Kg en bout de plateau 30 Kg répartie |
| Matériaux | Stratifié (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjolveur) |
| Roulettes double galet | 360° / Ø 50 mm |
| Classement Feu (NF P 92-503) | M1, Ininflammable |

Personnalisation et Accessoires

Découvrez tous les coloris* stratifiés disponibles sur notre page **Nuancier**
Plus de 15 coloris

Accessoires & Options disponibles

- 2 roulettes avec frein
- Chant du plateau de couleur identique au plateau
- Livraison en kit de la TML REF. GHTML5PFK-S

Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés. Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique



Nuancier des stratifiés - Lits / TML / meubles



Pin Aland Polaire



Acacia de Lakeland
Crème



Erable Mandal
Naturel



Chêne Vicenza Clair
<NEW>




Chêne Nebraska
Naturel



Chêne Nebraska
Gris



Noyer Lincoln

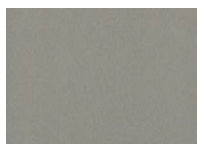

Aluminium brossé fin
Uniquement TML



Gris Cubanite




Bleu Horizon



Bleu Brume
<NEW>



Bleu Cosmique



Blanc craie



Terracotta



Rouge Cerise




Vert Kiwi



Jaune Curry

Les polymères - TML




Blanc



Erable

Les Bois - Lits / meubles / Assises



Blanc



Erable



Wenghé
<NEW>

Hygiène & désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien • pour meubles ou d'agents blanchissants.
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Il est également recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas

