

# TML6 Mixte, Polymère

Table à manger au lit / U, 2 plateaux, mixte polymère

Réf. GHTML6DF-P



Les tables à manger au lit **TML6** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés. Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché. La version **GHTML6DF-P** est composée de deux plateaux mixtes polymères (un plateau fixe + un plateau inclinable) très résistant mécaniquement et post-formé, son piètement en U lui assure un important dégagement frontal. Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

## Spécifications techniques

### PLATEAU

- **Mixte – 2 plateaux : 1 plateau fixe + 1 plateau inclinable**
- Sa taille peu encombrante est particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur
- **Polymère**
- > Très résistant mécaniquement
  - > Résistant à la chaleur
  - > Lisse sans aspérité
  - > Angles arrondis
  - > 2 zones « creusées » pratique pour la prise de repas du résident ou patient
- **Inclinaison du plateau** par crémaillère sur 5 positions

### PIÈTEMENT

- Large piètement **en U** pour une très bonne stabilité.
- Piètement déporté par rapport au plateau préserve les murs et la table lors des déplacements.
- Conseillé pour une utilisation avec un fauteuil
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

### STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc
- Grande robustesse et stabilité

### POIGNÉE ERGONOMIQUE


- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

### COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
  - Avec sécurité anti-coincement à la montée pour une sécurité optimale
  - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

### ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

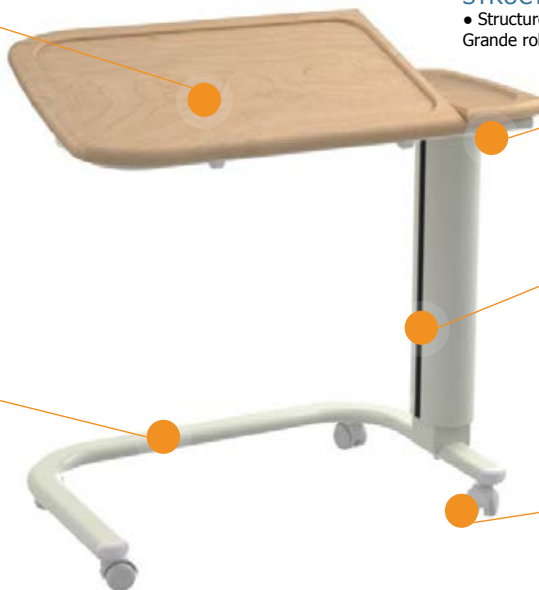

## Données techniques

Hauteur variable	<b>75.5 cm – 107 cm</b>	Inclinaison	<b>65° maximum</b>
Dimension du plateau inclinable	<b>70 x 41 cm</b>	Poids à vide	<b>19 kg</b>
Dimension du plateau fixe	<b>20 x 41 cm</b>	Charge maximale	<b>15 Kg en bout de plateau 30 Kg répartie</b>
Dimension global plateau	<b>90 x 41 cm</b>		
Epaisseur du plateau	<b>25 mm</b>	Matériaux	<b>Stratifié (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjoliveur)</b>
Hauteur du piètement	<b>9.5 cm</b>		
Longueur du piètement	<b>79 cm</b>	Roulettes double galet	<b>360° / Ø 50 mm</b>
Largeur du piètement	<b>47.5 cm</b>	Classement Feu (NF P 92-503)	<b>M1, Ininflammable</b>
Longueur totale	<b>90 cm</b>		
Largeur totale	<b>47.5 cm</b>		

## Options disponibles

- 2 roulettes avec frein
- Livraison en kit de la TML REF. GHTML6DFK-P


Découvrez tous les coloris Polymère disponibles sur notre page Nuancier au verso.

## Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés.
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas



## Les polymères - TML



Blanc



Erable



Wenghé  
<NEW>

