

TML6 Mixte, Stratifié

Table à manger au lit / U, 2 plateaux, mixte stratifié

Réf. GHTML6DF-S



Les tables à manger au lit **TML6** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés. Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché. La version **GHTML6DF-S** est composée de deux plateaux mixtes stratifiés (un plateau fixe + un plateau inclinable) résistant mécaniquement avec un large choix de coloris, son piètement en U lui assure un important dégagement frontal. Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

Spécifications techniques

PLATEAU

- Mixte – 2 plateaux : 1 plateau fixe + 1 plateau inclinable

Sa taille totale peu encombrante est particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur

• Stratifié

- > Plateaux esthétiques avec un large choix de coloris
- > Résistant mécaniquement
- > Résistant à la chaleur
- > Lisse sans aspérité
- > Angles arrondis
- > Chant blanc ABS

- **Inclinaison du plateau** par crémaillère sur 5 positions

PIÈTEMENT

- Large piètement en U pour une très bonne stabilité
- Piètement déporté par rapport au plateau préserve les murs et la table lors des déplacements
- Conseillé pour une utilisation avec un fauteuil
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

GALERIE & RÉGLETTE

- > Galerie située sur le côté droit du plateau fixe, elle permet de prévenir la chute d'objet
- > Réglette de lecture sur le plateau inclinable

STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc
- Grande robustesse et stabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
 - Avec sécurité anti-coincement à la montée pour une sécurité optimale
 - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

Hauteur variable	75 cm – 106.5 cm	Inclinaison	65° maximum
Dimension du plateau inclinable	70 x 41 cm	Poids à vide	18.5 kg
Dimension du plateau fixe	20 x 41 cm	Charge maximale	15 Kg en bout de plateau 30 Kg répartie
Dimension global plateau	90 x 41 cm	Matériaux	Stratifié (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjolveur)
Epaisseur du plateau	19 mm	Roulettes double galet	360° / Ø 50 mm
Hauteur du piètement	9.5 cm	Classement Feu (NF P 92-503)	M1, Ininflammable
Longueur du piètement	79 cm		
Largeur du piètement	47.5 cm		
Longueur totale	90 cm		
Largeur totale	47.5 cm		

Options disponibles

- 2 roulettes avec frein
- Chant du plateau de couleur identique au plateau
- Livraison en kit de la TML REF. GHTML6DFK-S

Découvrez tous les coloris stratifiés disponibles sur notre page Nuancier au verso.

Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés.
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas



Nuancier des stratifiés - Lits / TML / meubles



Pin Aland Polaire



Acacia de Lakeland
Crème



Erable Mandal
Naturel



Chêne Vicenza Clair
<NEW>




Chêne Nebraska
Naturel



Chêne Nebraska
Gris



Noyer Lincoln

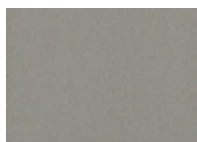

Aluminium brossé fin
Uniquement TML



Gris Cubanite




Bleu Horizon



Bleu Brume
<NEW>



Bleu Cosmique



Blanc craie



Terracotta



Rouge Cerise



Vert Kiwi



Jaune Curry

