

TML7 Fixe, Stratifié

Table à manger au lit / H, 1 plateau, fixe stratifié

Réf. GHTML7PF-S



Les tables à manger au lit **TML7** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés. Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché. La version **GHTML7PF-S** d'un piètement en H et d'un plateau fixe stratifié résistant mécaniquement avec un large choix de coloris. Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

Spécifications techniques

PLATEAU

- **Fixe**
Sa taille peu encombrante est particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur
- **Stratifié**
 - > Plateaux esthétiques avec un large choix de coloris
 - > Résistant mécaniquement
 - > Résistant à la chaleur
 - > Lisse sans aspérité
 - > Angles arrondis
 - > Chant blanc ABS

PIÈTEMENT

- Piètement **en H** pour une très bonne stabilité
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

GALERIE

Située sur le côté droit, elle permet de prévenir la chute d'objets (le plateau peut également être réalisé sans galerie, à préciser à la commande)

STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc
Grande robustesse et stabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
 - Avec sécurité anti-coincement à la montée pour une sécurité optimale
 - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

Hauteur variable	75 cm – 106.5 cm
Dimension du plateau	90 x 41 cm
Épaisseur du plateau	19 mm
Hauteur du piètement	9.5 cm
Longueur du piètement	79 cm
Largeur du piètement	46 cm
Longueur totale	90 cm
Largeur totale	46 cm

Poids à vide	18.5 kg
Charge maximale	15 Kg en bout de plateau 30 Kg répartie

Matériaux	Stratifié (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjolveur)
Roulettes double galet	360° / Ø 50 mm
Classement Feu (NF P 92-503)	M1, Ininflammable

Options disponibles

- 2 roulettes avec frein
- Chant du plateau de couleur identique au plateau

Découvrez tous les coloris stratifiés disponibles sur notre page Nuancier au verso.

Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés.
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas



Nuancier des stratifiés - Lits / TML / meubles



Pin Aland Polaire



Acacia de Lakeland
Crème



Erable Mandal
Naturel



Chêne Vicenza Clair
<NEW>




Chêne Nebraska
Naturel



Chêne Nebraska
Gris




Noyer Lincoln

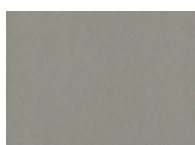

Aluminium brossé fin
Uniquement TML



Gris Cubanite

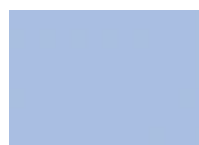


Bleu Horizon



Bleu Brume
<NEW>



Bleu Cosmique



Blanc craie



Terracotta



Rouge Cerise



Vert Kiwi



Jaune Curry

