



Cadre

Encombrement minimal une fois fermé

Matériaux légers pour une utilisation optimale

Charnières

Charnières brevetées

Pivotables à 360°

Charnières garanties 10 ans

Pas de champ visuel entre les battants

Plaques

Désinfection Facile

Laissent passer la lumière

Extrêmement résistantes aux chocs


Roulettes

Stabilité assurée

Extrêmement maniable



RBF

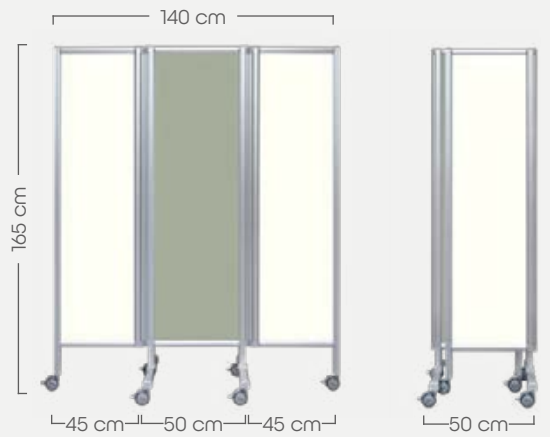

Poids : 15,20 kg • Espace ajouré : 20 cm

RBF200



Poids : 18 kg • Espace ajouré : 20 cm

Matériaux

Cadre : tube en aluminium extrudé gris, surface lisse et anodisée pour une meilleure tenue dans le temps. Pièces plastiques en polyamide avec 15 % de fibre de verre pour une forte résistance aux nombreuses manipulations.

Roulettes : corps de roue en polyamide, bande de roulement en polyuréthane, ne laisse pas de trace au sol. Les roulettes sont équipées de freins et mesurent 6,5 cm de diamètre pour assurer la stabilité du paravent.

Charnières : charnières RTC pleines incassables brevetées, disposées sur toute la hauteur des battants. Elles leur permettent une rotation à 360°, et ne laissent aucun champ visuel entre chacun. Garanties 10 ans.

Plaques : polycarbonate de 2 mm d'épaisseur, blanc translucide ou transparentes, difficilement inflammable. Classe des matériaux DIN EN 13501-1, B-s1 d2, extrêmement résistantes aux chocs.



Designs



01. Jaune or



02. Turquoise aquatique



03. Rouge œillet



04. Bleu limpide



05. Marron cuivré



06. Beige jaune



07. Turquoise opale



08. Gris rouge



09. Bleu parisien



10. Rouge melon opale



11. Crème d'abricot



12. Vert clown



13. Violet tulle



14. Bleu Madonna



15. Orange abricot



16. Blanc lait



17. Turquoise lac de montagne



18. Abricot bois de rose



19. Bleu gris




20. Mauve mohair



21. Vert du Nil



22. Marqueur vert

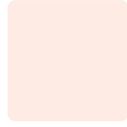

23. Rouge lumière du Sahara




24. Bleu Bermudes



25. Graige clair



26. Gris brume

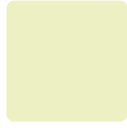


27. Pistache claire



28. Blanc poivré



29. Blanc cassé

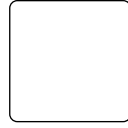

30. Blanc standard



Abstract



Bananaplants



Bright wood



Dark wood



Dandelion



Dino



Dream beach



Flamingo



Ginkgo



Heron



Lavender



Leaves



Meadow



Pivoine



Papillon



Relax beach



Space



Sub marine



Town



Wild plants



Yellow palm