



Cadre



Pas de champ visuel entre les battants



Très peu encombrant une fois fermé



Charnières brevetées 360° garanties 10 ans



Matériaux légers pour une utilisation optimale

Tissu



Tissu anti-bactérien



Difficilement inflammable, classé M1



Matériaux

Cadre : tube en aluminium extrudé gris, surface lisse et anodisée pour une meilleure tenue dans le temps. Pièces plastiques en polyamide avec 15 % de fibre de verre pour une forte résistance aux nombreuses manipulations.

Roulettes : corps de roue en polyamide, bande de roulement en polyuréthane, ne laisse pas de trace au sol. Les roulettes sont équipées de freins et mesurent 6,5 cm de diamètre pour assurer la stabilité du paravent.

Charnières : charnières RTC pleines incassables brevetées, disposées sur toute la hauteur des battants. Elles leur permettent une rotation à 360°, et ne laissent aucun champ visuel entre chacun. Garanties 10 ans.

Rideau : rideau tendu en Staph CHEK®, antibactérien, difficilement inflammable, imperméable aux liquides et n'absorbe pas les saletés. Disponible en 5 couleurs.

RLP/x

4 largeurs :
100, 150, 200, 250 cm

Grâce aux charnières 360°, chaque battant peut être mis dans la position souhaitée. Pour assurer une meilleure stabilité, les battants doivent toujours être positionnés en zigzag. Dans le cas d'une utilisation avec battants alignés, utilisez les pieds stabilisateurs RLP/C.

2 hauteurs :
• 165 cm
• 185 cm

Réf	Nbr battants	Poids (kg)	Largeur (cm)
RLP/2	2	3,8	100
RLP/3	3	5,7	150
RLP/4	4	7,6	200
RLP/5	5	9,5	250


Accessoires

RLP/C




Maintient le paravent en position ouverte et/ou accueille jusqu'à 4 paravents pour la création d'une séparation ou la mise en place d'un système de guidage.

- Polyamide renforcé en fibres de verre
- 8 x 15 x 30 cm (H x L x P)
- Poids : 1,3 kg

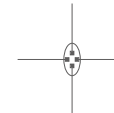

4 paravents

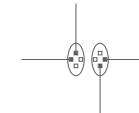

2 paravents en angle droit



2 paravents en ligne

RLP/WA



Set d'entretoises (x2) pour fixation au mur :
• Distance standard : 100 mm
• Longueur spéciale possible sur demande

RLP/KLS



Set d'étaux (x2) pour fixation sur rail médical.

RLP/ES



Totem en acier, idéal là où un raccordement mural n'est pas possible.
Hauteur : 165 cm

Nuancier

Tissu tendu staph CHEK® :

- Stable et compact
- Anti-microbien
- Difficilement inflammable
- Sans risque pour la peau
- Antistatique
- Imperméable
- Résistant aux tâches et à la saleté
- Durable



bleu clair



blanc



jaune



beige



mint